


**permobil** | SEATING + POSITIONING

**ROHO® LTV Seat® Cushion**  
Manual do Utilizador



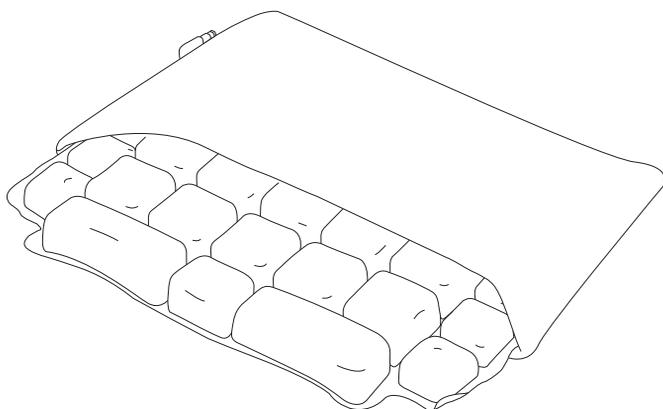


## Assento LTV® Manual do Proprietário

Conteúdo da embalagem: Assento LTV, Capa LTV, kit de reparo, bomba manual, manual do proprietário, livreto suplementar de garantia limitada, cartão de registro do produto

### Para ajustar seu Assento LTV:

1. Abra a válvula. Encha com a bomba manual até que todas as células de ar estejam visivelmente cheias. Feche a válvula e depois remova a bomba manual.
2. Coloque o Assento LTV na sua superfície de assentamento: O lado antiderrapante da Capa LTV deve estar para baixo, e a parte com zíper deve estar voltada para trás. A válvula deve estar no canto dianteiro esquerdo.
3. Sente no Assento LTV em sua posição normal de acomodação.
4. Abra a válvula para liberar ar. À medida que o ar é liberado, você irá afundar lentamente em seu Assento LTV. Solte o ar até estar próximo do seu nível de conforto desejado, e depois feche a válvula. Libere ou adicione mais ar até atingir seu nível de conforto desejado.

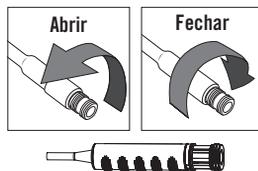


### Para limpar a Capa LTV:

Remova a capa da almofada.

Se a capa for de Tecido Acolchoado: Lavar à máquina a frio, ciclo suave, com cores iguais.

Secar ao ar livre.

Se a capa for Ultraleather™: Lavar à mão com detergente neutro. Seque com pano ou ao ar livre.

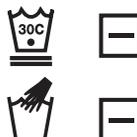

### Para limpar a Almofada LTV:

1. Feche a válvula e coloque a almofada em uma bacia grande. Use um detergente líquido para lava-louças, detergente para roupas, ou outro detergente multiuso para limpeza geral. Siga as instruções do rótulo do produto para limpeza de superfície.
2. Use uma escova plástica de cerdas macias, esponja ou pano para esfregar suavemente todas as superfícies.
3. Enxágue a almofada com água limpa e seque ao ar livre ou em uma toalha.
  - NÃO exponha à luz solar direta.
  - NÃO use detergentes de lavadoras de louças automáticas, pois são muito cáusticos para segurança pessoal.

**⚠️ Advertências: NÃO use a almofada como dispositivo de flutuação (ex., um salva-vidas). Ela NÃO irá aguentá-lo na água. Mantenha a almofada longe de objetos pontiagudos e cinzas quentes.**

**Prazo de Garantia Limitada** a partir da data em que o produto foi comprado originalmente: Assento LTV: 12 meses; Capa LTV: 6 meses. Consulte também o suplemento de Garantia Limitada fornecido com o seu produto ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

 ROHO, Inc., 100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 EUA

EUA: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Atendimento ao cliente: orders.roho@permobil.com

Fora dos EUA: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com

permobilus.com

Assento LTV é fabricado nos EUA.

Os produtos podem ser cobertos por uma ou mais patentes e marcas comerciais dos EUA e estrangeiras, incluindo LTV®, LTV Seat®, ROHO®, and shape fitting technology®. Ultraleather™ é uma marca registrada da Ultrafabrics.

As informações dos produtos são alteradas conforme necessário; Informações atualizadas do produto estão disponíveis em permobilus.com.

ROHO, Inc. é parte do Permobil Seating and Positioning.

© 2005, 2018 Permobil

Rev. 07/29/2018

# permobil | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

U.S.: 1-800-851-3449 Fax 1-888-551-3449

Outside U.S.: 1-618-277-9150 Fax 1-618-277-6518

[permobilus.com](http://permobilus.com)